

ピュアナノ purenano ZX-05

管理医療機器 電解水素水整水器(アルカリ性)S2
医療機器認証番号 231AKBZX00005000 取得商品

溶存水素濃度

最大 **1300ppb**
生成可能

※1

高効率ダブル電解槽を搭載
独自技術の10枚の電極で
高水素濃度の電解水が生成可能に

独自技術

生成量が水素水約 **19** .. 酸性水約 **1** の独自技術



胃腸症状の改善に有効な電解水素水
ZX-05 の効果・効能 胃腸症状の改善

胃もたれや
胃の不快感を
和らげます

胃腸の働きを
助け、お通じを
良好にします



※1 溶存水素計 東亜ディーケーケー製 DH-35A による測定値。溶存水素濃度は水質によってばらつくことがあります。他の測定器では異なる数値が表示されることがあります。

新発想の溶存水素発生システムを開発し、20物質の除去も可能に!

新型 高効率ダブル電解槽

従来型電解槽 (5枚)
 新開発の水素電解槽 (5枚)
 合計10枚の電極板を搭載

ORP値が過去最高に

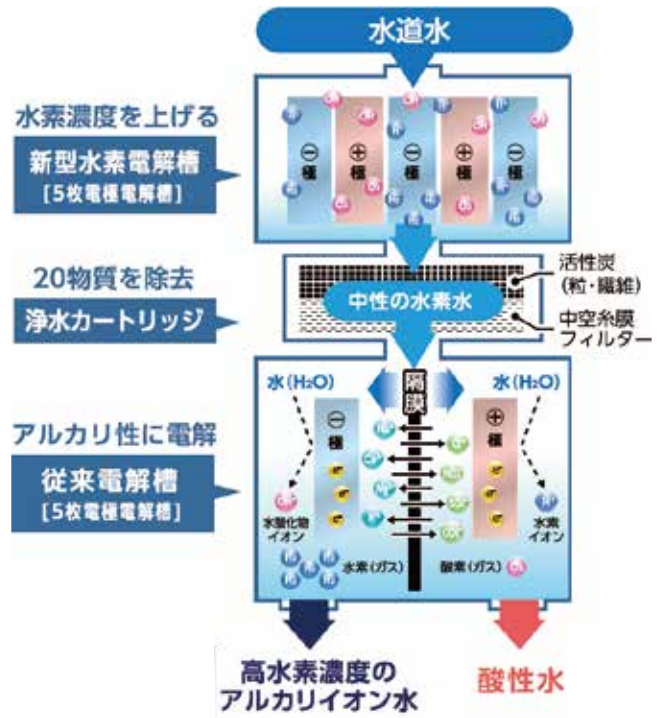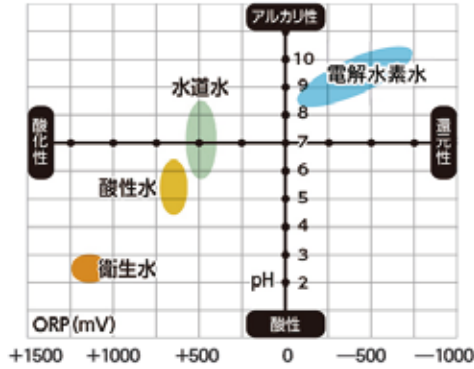

過去最高 1300ppbの溶存水素量を達成^{※1}

※1 溶存水素計 東亜ディーケーケー製 DH-35A による測定値。溶存水素濃度は水質によってばらつくことがあります。他の測定器では異なる数値が表示されることがあります。

浄水器の常識が今変わる! 性能と機能にこだわったZX-05の実力

普通の浄水器と全く違う
 高濃度 × アルカリ水溶液
 健康的な生活を考える

胃腸症状の改善に働きかけるなど医学的な効果が認められている管理医療機器のピュアナノ ZX-05 をご家庭で! 健康的な生活をバックアップします。



医学的な効果が認められている整水器

還元とは

酸化とは

胃もたれや胃の不快感を和らげます

胃腸の働きを助けお通じを良好にします

物を錆びさせない鉄を錆びさせない水素と化合する事酸素を失う事


物を錆びさせる鉄を錆びさせる水素を失う事酸素と化合する事

医学的な効果が認められる水溶液にする為には、アルカリ性である事が重要です。

医療機器認証番号231AKBZX00005000



20物質が除去可能なカートリッジを搭載!

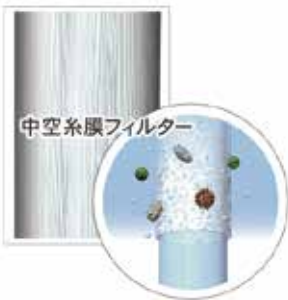

中空糸膜フィルターも搭載!

0.1μmの微細な穴が開いたポリスルホン中空糸(パイプ状の糸)を束ねたものが中空糸膜。赤さびやミクロの汚れをろ過しつつ、ミネラル分はそのまま通します。

《浄水器協会自主規格3物質》

- ①鉄(粒子状鉄) ②アルミニウム(中性)
- ③四塩化炭素

JIS指定17物質


- ①遊離残留塩素 ⑩プロモホルム
- ②濁り ⑪テトラクロロエチレン
- ③総トリハロメタン ⑫トリクロロエチレン
- ④クロロホルム ⑬(農業)CAT
- ⑤プロモジクロロメタン ⑭(カビ臭)2-MIB
- ⑥ジプロモクロロメタン ⑮溶解性鉛
- ⑦ジェオスミン ⑯ベンゼン
- ⑧陰イオン界面活性剤 ⑰シス、トランス 1,2ジクロロエチレン
- ⑨フェノール類

業界の常識を変えた! トップクラスの節水能力 さらに省エネ設計

節水・エコ機能

19ℓの電解水素水の生成に対して排水(酸性水)量が**1ℓ**という従来機の約4分の1(当社比)独自機能を搭載! 大幅な節水が可能になりました。もちろん浄水モードでは排水されません。

独自の技術で大幅改善
今まで出来なかった次世代システム採用

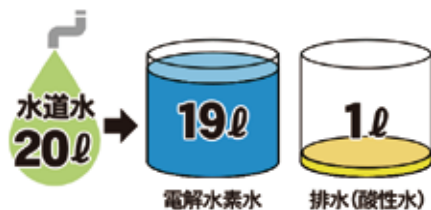

1日20ℓ 10年間使用した場合
本体 330,000円(税込)、専用カートリッジ 13,200円(税込)
(330,000円 + [13,200円 × 9本]) ÷ (365日 × 10年 × 20ℓ)
+ 電気代・水道代 = 500ml 約3.5円

捨てる水ゼロモードを搭載

オートパワーオフ機能搭載

選べる11種類のお水タイプが生成可能

ボタンを押すだけの簡単操作で水素たっぷり、暮らしに最適な11種類のお水をご使用頂けます。

飲用水	飲み始め	飲み慣れ	日常飲用	機能水		
浄水	レベル1	レベル2	レベル3	衛生水	酸性水	強アルカリ
薬・サプリ	初めて飲む方	米研ぎ・炊飯	お茶・お料理	洗浄除菌	洗顔	アク抜き・野菜洗い

水素たっぷり! しっかり電解

電解しにくい水質でも しっかり電解

プラス水素ボタン

水素濃度約4倍*

※流量2.5ℓ/分(定格流量)で pH9.5合成水使用時(JIS T 2004に基づく合成水)通常モードとプラス水素モード比較。水質により異なります



pHを自動で一定に保つ賢い機能

pH自動コントロール機能

流量にかかわらずpHを自動で一定に調整する機能を搭載。

※水素1. 2. 3の場合

使いやすさにこだわった機能

野菜洗いや生活の中でもパワフルに使える!

最大吐水量毎分約5.5ℓ

シンクまわりに置きやすい!

デリバリーパイプ65cm



手間要らず! 定期的に電極メンテナンス!

自動クリーニング機能




さらに!注目の除菌物質HOCLを含む強酸性水(pH2.5 ~ 3.5程度)生成モードを搭載

ワンポイントHOCL次亜塩素酸とは

数十年に渡り、医療機関や畜産関係で使用されてきており、現在でも様々な国立大学や大学機関でも試験・研究されている話題の除菌物質です。是非、除菌水としてご活用頂きたい注目のお水です。

選べる11種類のお水とpH値の目安

ボタンを押すだけの簡単操作で水素たっぷり、暮らしに最適な11種類のお水をご使用頂けます。

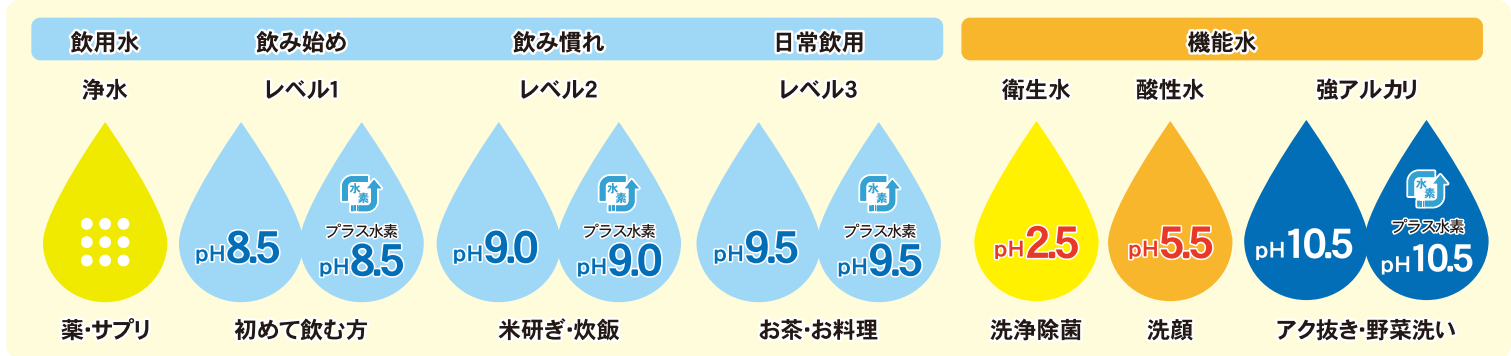

カートリッジ交換のお知らせについて

カートリッジ交換ランプ

リセット
2秒押し
①交換

交換時期になると音と点滅・点灯表示でお知らせします。

1日のご使用量10ℓの場合 **約2年** 1日のご使用量20ℓの場合 **約1年**

ZX-05 専用浄水器カートリッジ		メーカー希望価格
標準	JIS17物質+浄水器協会自主規格3物質を除去	13,200円(税込)

●カートリッジ寿命(交換時期)は、使用水量・水質・水圧により大幅に短くなることがあります。(ろ過能力に関係なく、濁りなどの微粒子により中空糸膜が目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が少なく、寿命が短くなることがあります。)

purenano ZX-05

- 仕様
- 本体寸法(約)／幅255×奥行142×高さ324mm
 - 質量(約)／4.1kg(満水時5.1kg)
 - 定格 / AC100V(50/60Hz)
 - 消費電力／220W(待機時：約0.5W)
 - 電源コード(約)／2.5m
 - 給水仕様／吐水蛇口分岐式
 - 給水接続／レバー切替
 - 本体通水可能水圧(動水圧)／約70～500kPa
 - 使用可能水道管圧力(静水圧)／約70～750kPa
 - 電解

電解水素水3段階+強電解水素水1段階、酸性1段階、衛生水1段階

<処理水量>

[電解水素水1.2.3 動水圧100kPaの場合]	ここ重要!!
吐水量(約)／電解水素水：2.38ℓ／分	
排水量(約)／酸性水：0.12ℓ／分	
[電解水素水1.2.3 動水圧350kPaの場合]	
吐水量(約)／電解水素水：5.5ℓ／分	
排水量(約)／酸性水：0.29ℓ／分	

電解水素水整水器(アルカリ性)S2
医療機器認証番号 231AKBZX00005000

- 浄水カートリッジ
- <ろ過材料>
- 中空糸膜、粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布 等
- <能力>
- ろ過能力(約)遊離残留塩素8,000L(※1)
- 濁り8,000L(※2)
- 総トリハロメタン8,000L(※1)
- など、JIS規格指定17物質+浄水器協会自主規格3物質を除去
- ※1：家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験で除去率 80%の値
- ※2：家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験でろ過水量 50%の値
- <カートリッジの寿命>
- 使用可能通水量：8,000L
- 使用可能日数：730日
- ※1日のご使用10ℓの場合約2年



【同梱付属品】
●分岐栓取付用付属品 ●カートリッジ交換シール ●衛生水生成用食塩
●pH測定液セット 他 ●ホース固定バンド ●デリバリーパイプ

希望小売価格：330,000円(税込) <工費別添>

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。■電解水(飲用)のご注意 ●腎疾患(腎不全・カリウム排せつ障害など)の方は電解水(飲用)を飲用しないで下さい。●電解水(飲用)を飲用するときは、次のことにご注意下さい。①医薬品を電解水(飲用)で服用しないで下さい。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られない場合は、医師にご相談下さい。●次の方はご使用前に医師にご相談下さい。①持病のある方または身体の弱っている方 ②腎臓に障害のある方または身体に異常を感じている方 ③医師の治療を受けている方 ●初めてご利用になる場合、pH値が中性に近い水から少量づつ(コップ1～2杯)、2週間程度電解水(飲用)になれていただき、順次 pH 値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談下さい。●次の方は酸性水を利用する前に医師にご相談下さい。①肌の弱い方 ②アレルギー体質の方 ●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談下さい。●本カタログ掲載商品は日本国内でのご使用下さい。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間湯沸かし器には使用しないで下さい。

●ご使用上のご注意 ●水道法の水質基準に不適な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることは出来ません。●地域によってカートリッジの寿命に差が出ます。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品は日本国内でのみ有効です。

製造元
株式会社フジ医療器

ピュアナノサービスセンター

0120-965-350 受付：月曜～金曜 9:30～18:00
※祝祭日、弊社休日を除く

販売元
NIC 株式会社エヌ・アイシー

〒213-0002
神奈川県川崎市高津区二子 6-14-7-3F

フリーコール **0120-303-534**

選べる 11 種類のお水と pH 値の目安

ボタンを押すだけの簡単操作で水素たっぷり、暮らしに最適な11種類のお水をご使用頂けます。

飲用水			機能水		
飲み始め	飲み慣れ	日常飲用	衛生水	酸性水	強アルカリ
浄水	レベル1	レベル2	レベル3	pH2.5	pH10.5
薬・サブリ	初めて飲む方	米研ぎ・炊飯	お茶・お料理	洗浄除菌	洗顔
				洗剤	アク抜き・野菜洗い

カートリッジ交換のお知らせについて

カートリッジ交換ランプ

リセット
2秒押し
①交換

交換時期になると音と点滅・点灯表示でお知らせします。

1日のご使用量10ℓの場合 **約2年**

1日のご使用量20ℓの場合 **約1年**

ZX-05 専用浄水器カートリッジ		メーカー希望価格
標準	JIS17物質+浄水器協会自主規格3物質を除去	13,200 円(税込)

●カートリッジ寿命(交換時期)は、使用水量・水質・水圧により大幅に短くなることがあります。
(ろ過能力に関係なく、濁りなどの微粒子により中空糸膜が目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が少なく、寿命が短くなることがあります。)

purenano ZX-05

仕様

- 本体寸法(約)／幅255×奥行142×高さ324mm
- 質量(約)／4.1kg(満水時5.1kg)
- 定格 / AC100V(50/60Hz)
- 消費電力／220W(待機時：約0.5W)
- 電源コード(約)／2.5m
- 給水仕様／吐水蛇口分岐式
- 給水接続／レバー切替
- 本体通水可能水圧(動水圧)／約70～500kPa
- 使用可能水道管圧力(静水圧)／約70～750kPa
- 電解
- ＜電解能力切替＞
- 電解水素水3段階+強電解水素水1段階、酸性1段階、衛生水1段階

＜処理水量＞

[電解水素水1.2.3 動水圧100kPaの場合]

吐水量(約)／電解水素水：2.38L／分

排水量(約)／酸性水：0.12L／分

[電解水素水1.2.3 動水圧350kPaの場合]

吐水量(約)／電解水素水：5.5L／分

排水量(約)／酸性水：0.29L／分

電解水素水整水器(アルカリ性)S2

医療機器認証番号 231AKBZX00005000

- 浄水カートリッジ
- ＜ろ過材料＞
- 中空糸膜、粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布 等
- ＜能力＞
- ろ過能力(約)遊離残留塩素8,000L(※1)
- 濁り8,000L(※2)
- 総トリハロメタン8,000L(※1)
- など、JIS規格指定17物質+浄水器協会自主規格3物質を除去
- ※1：家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験で除去率 80%の値
- ※2：家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験でろ過水量 50%の値
- ＜カートリッジの寿命＞
- 使用可能通水量：8,000L
- 使用可能日数：730日
- ※1日のご使用10ℓの場合約2年




- 分岐栓
- 衛生水カートリッジ
- 食塩計量用
- 衛生水スプーン付

[同梱付属品]

- 分岐栓取付用付属品
- カートリッジ交換シール
- 衛生水生成用食塩
- pH測定液セット 他
- ホース固定バンド
- デリバリーパイプ

希望小売価格：330,000 円(税込) <工事費別途>

安全に関するご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。■電解水(飲用)のご注意●腎疾患(腎不全・カリウム排せつ障害など)の方は電解水(飲用)を飲用しないで下さい。●電解水(飲用)を飲用するときは、次のことにご注意下さい。①医薬品を電解水(飲用)で服用しないで下さい。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られない場合は、医師にご相談下さい。●次の方はご使用前に医師にご相談下さい。①持病のある方または身体の弱っている方②腎臓に障害のある方または身体に異常を感じている方③医師の治療を受けている方●初めてご利用になる場合、pH 値が中性に近い水から少量づつ(コップ1～2杯)、2週間程度電解水(飲用)になれていただき、順次 pH 値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談下さい。●次の方は酸性水を利用する前に医師にご相談下さい。①肌の弱い方②アレルギー体質の方●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談下さい。●本カタログ掲載商品は日本国内でのご使用下さい。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間湯沸かし器には使用しないで下さい。

ご使用上のご注意 ●水道法の水質基準に不適な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることは出来ません。●地域によってカートリッジの寿命に差が出ます。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品は日本国内でのみ有効です。

<p>製造元</p> <p>株式会社フジ医療器</p> <p>ピュアナノサービスセンター</p> <p> 0120-965-350 受付：月曜～金曜 9:30～18:00 ※祝祭日、弊社休日を除く</p>	<p>販売元</p>
--	------------